



# Fenix



# ILT-TANGA VEGLEIÐING

Telefon: +298 311909

# YVIRLIT




- Vit hava opið gerandisdagar frá kl 08.00 - 17.30.
- Um tykkum tørvar bráðfeingishjálp ring **112.**
- Tilhoyri so sum fløskur, slangir og brillir, kunnu tit bíleggja frá okkum, gerandisdagar á telefon +298 31 19 09.
- Ilt-útgerðin er ogn hjá Fønix, og skal tískil latast aftur til okkara eftir brúk. Lat okkum frætta Fønix heintar útgerðina.

## Yvirlit yvir hvussu leingi iltin heldur sær *tá tangin er fullur*

DOSERING L/MIN.	BRÚKSTIÐ (SIRKA)
0,5	36 DAGAR
1,0	18 DAGAR
1,5	12 DAGAR
2,0	9 DAGAR
2,5	7 DAGAR
3,0	6 DAGAR
4,0	5 DAGAR

# LÆR TÍN TANGA AT KENNA

1. Stussur til iltslangu
2. Stilla l/min
3. Display til tangan
4. Útloysari til tann berbara
5. Stussur til tann berbara
6. Døgg-ílat
7. Tangi við flótandi ilt
8. Hjól
9. Trýst málari

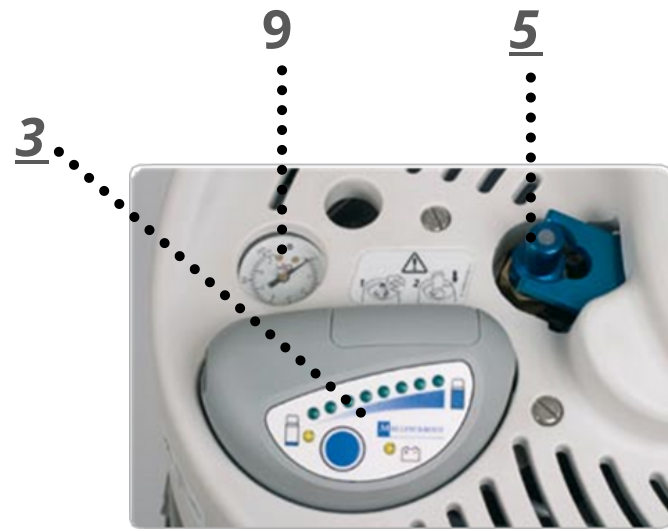

**Dømi, tá brúki er 1 l/min**

DISPLAY (LJÓS)	BRÚKSTÍÐ (SIRKA)
●	0-1 DAG
●	2 DAGAR
● ●	4 DAGAR
● ● ●	7 DAGAR
● ● ● ●	9 DAGAR
● ● ● ● ●	11 DAGAR
● ● ● ● ● ●	13 DAGAR
● ● ● ● ● ● ●	15 DAGAR
● ● ● ● ● ● ● ●	18 DAGAR

# MANNAGOND TIL AT SETA ILT ÚTGERÐINA UPP

Fønix setur ilt-útgerðina upp fyri kunda, tá komið verður á staðið fyrstu ferð. Tó er umráðandi at lesa hesa mannagongd, so tann ið nýtir iltina, ella tann ið tekur sær av tí, er kunnaður um hvussu mannagongdin er.

1



## Display

Trýst á tann bláa knøttin. Tær grønu perunar siga tær hvussu nógv er eftir í tanganum. Lýsir tann gula, set teg í samband við okkum.

5



## Iltslanga

Set iltslanguna á stussin - Gev gætur, slangan skal ikki vera longri enn 15 metur.

2



## Kanna døgg-ílatið

Døgg-ílatið samlar vatn og skal tømast javnan, soleiðis tað ikki flýtir yvir.

6



## Stilla iltina inn til tín tørv

Stilla iltina inn til tín tørv, hettar hevur lækurin kunna teg um tá tú fær tanga.

3



## Fuktari

Hava tygum fingið at vita at tørvur er á fuktara, so skal fuktarin skúvast á stussin har slangan vanligt er sett til.

**Sí mynd.**

7



## Aftaná brúk

Útgerðin sløknar við at sneiða iltskamtin soleiðis hann kemur at standa á 0.

4



## Fyll fuktara

Skrúva lokið av fuktara, og fyll hann upp til strikuna við avkøldum kókaðum vatni, einaferð um døgnið. Skróva síðani lokið væl á aftur.



## Battarí

Tá battaríknøtturin lýsir gult, merkir hettar at tað er lítið og einki í tanganum. Ring tá til okkara á +298 31 19 09.

# Mannagongd til, tá Helios Plus og Marathon skulu fyllast





# TRYGDAR ÁVÍSING

- Royking er bannað nærhendis iltútgerðini
- Nýt aldrin olju, feitt ella annað líknandi til iltútgerðina - Ilt kann skapa eina kemiska reaktión við feittstoffum.
- Útgerðin má ikki flytast frá heimum av øðrum enn Fønix.
- Nýt aldrin meira ilt, enn hvat læknin hevur kunnað teg um tú skalt brúka. Ilt-nýtslan kann bert økjast í samráð við lækna.
- Fønix tekur sær av at gera tangar aftur um teir krevja ábøtur, tískil skulu tit aldrin fara arbeiða uppá tangan sjálvi.
- Ivast tit í nøkrum, vinarliga ring til okkara á TEL: +298 31 19 09



# Fønix - TÍN ILT VEITARI



## VIRÐISGRUNDARLAG

### Fønix skal vera kent fyri:

- at vera ein álitandi samstarvsfelagi
- at dygd, trygd og trivnaður eru í háseti
- at øll søla og øll arbeiði vera væl úr hondum greidd til kappingarførar prísir
- at vera eitt lokkandi arbeiðspláss við skipaðum viðurskiftum á øllum økjum

## MÁLSETNINGUR

### Vit vilja støðugt arbeiða fyri:

- at fasthalda støðuna, sum ein av fremstu fyrítøkum á føroyska marknaðinum
- at skapa nøktandi fíggarlig úrslit
- at varveita eitt fakligt og sosialt umhvørvi, soleiðis at røttu fakfólkini trívast í felagnum
- at vaksa um virkseimið, við at troyta aðrar marknaðir, um hetta kann gerast við einum nøktandi fíggarligum úrsliti, í mun til váðan

# SAMBAND

Mykinesgøta 8

FO-100 Tórshavn

Telefon: +298 311909

Teldupostur: [fonix@fonix.fo](mailto:fonix@fonix.fo)

Heimasíða: [www.fonix.fo](http://www.fonix.fo)



# Fonix